


PROTETYKA

Katalog skierowany jest do profesjonalistów z branży stomatologicznej

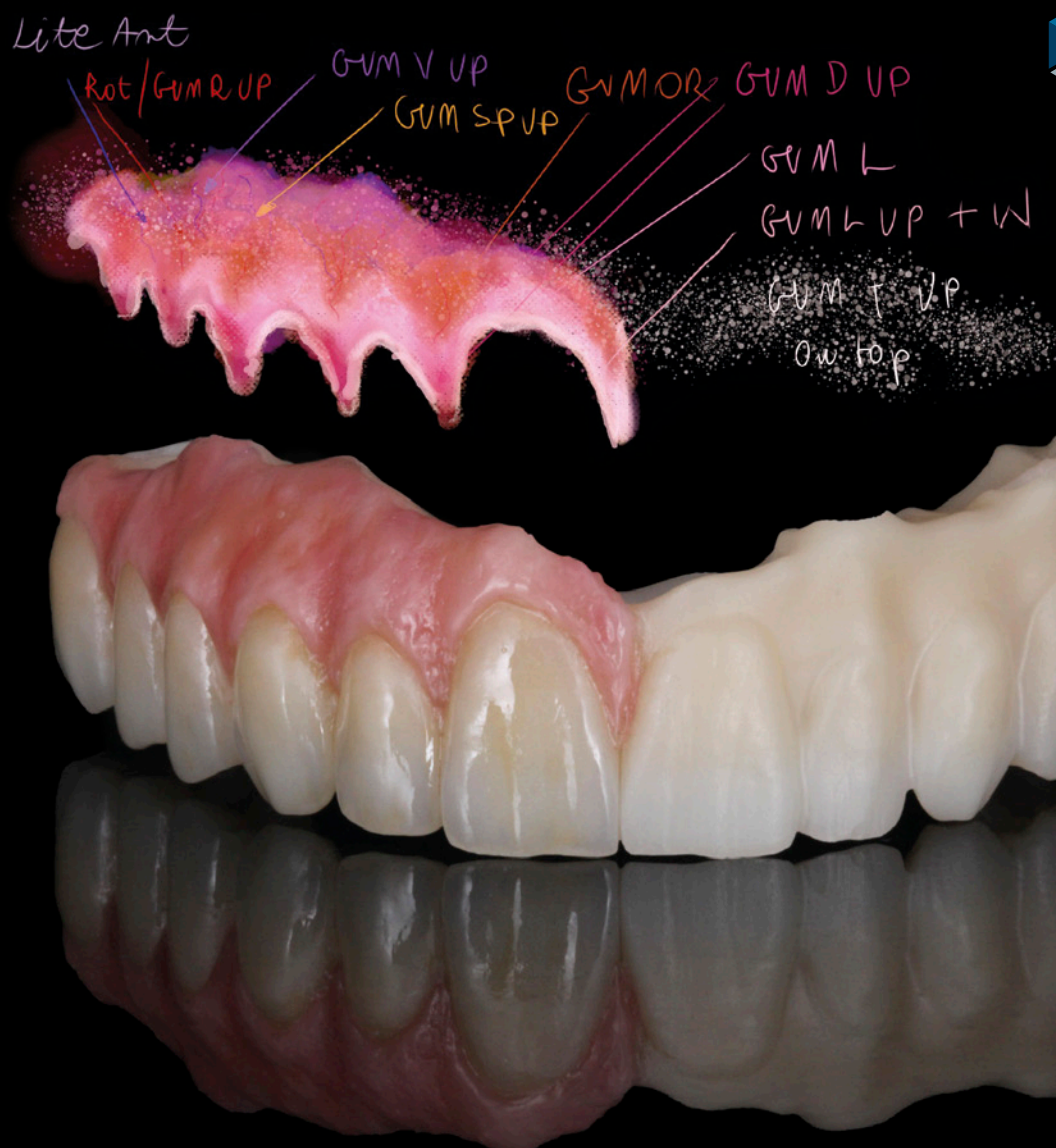

Nowa koncepcja z CERAMAGE, CERAMAGE UP i LITE ART oferuje niezliczone możliwości estetycznego ulepszenia wszelkiego rodzaju uzupełnień – niezależnie od zastosowanego materiału czy metody wykonania, analogowej lub cyfrowej. **Kluczem do sukcesu jest niezawodny system łączenia: CERARESIN BOND lub SHOFU Universal Primer.**

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny promocyjne w gazetce są najniższymi dostępnymi cenami z 30 dni przed obowiązywaniem promocji.

MATERIAŁY CAD/CAM

DYSKI CYRKONOWE SHOFU SUPRA


Dysk cyrkonowy SHOFU ZR Lucent Supra łączy wysokowytrzymałościowe odmiany cyrkonu w niezwykle potężnym wielowarstwowym materiale CAD/CAM.

- Wzrastające przezierności od strefy przyszyjkowej do strefy szkliwnej oraz wyjątkowa wytrzymałość na zginanie we wszystkich strefach sprawiają, że jest to materiał premium, który sprosta każdemu wyzwaniu klinicznemu.
- Bez względu na rodzaj pracy, dysk Supra pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty we wszystkich przypadkach. Materiał obejmuje szeroki zakres wskazań, w tym mosty 14 punktowe z dwoma połączonymi punktami w obszarach przednich i tylnych.
- Dzięki większemu odbiciu światła w obszarze przyszyjkowym, w porównaniu z ZR Lucent, ZR Lucent Supra posiada także realistyczny wygląd bez żadnych kompromisów, zwłaszcza w przypadkach wymagających bardziej skutecznego maskowania, takich jak przebarwione korzenie zębów lub implanty.



SHOFU Disk ZR Lucent Supra oferuje nie tylko doskonałe właściwości estetyczne, ale także wysoką wytrzymałość na zginanie wynoszącą ponad 1 000 MPa na całej wysokości dysku, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas wykonywania bardzo dużych odbudów. Pozwala to swobodnie wybierać pozycję osadzenia na dysku.

Więcej bezpieczeństwa - nawet podczas wykonywania dużych odbudów

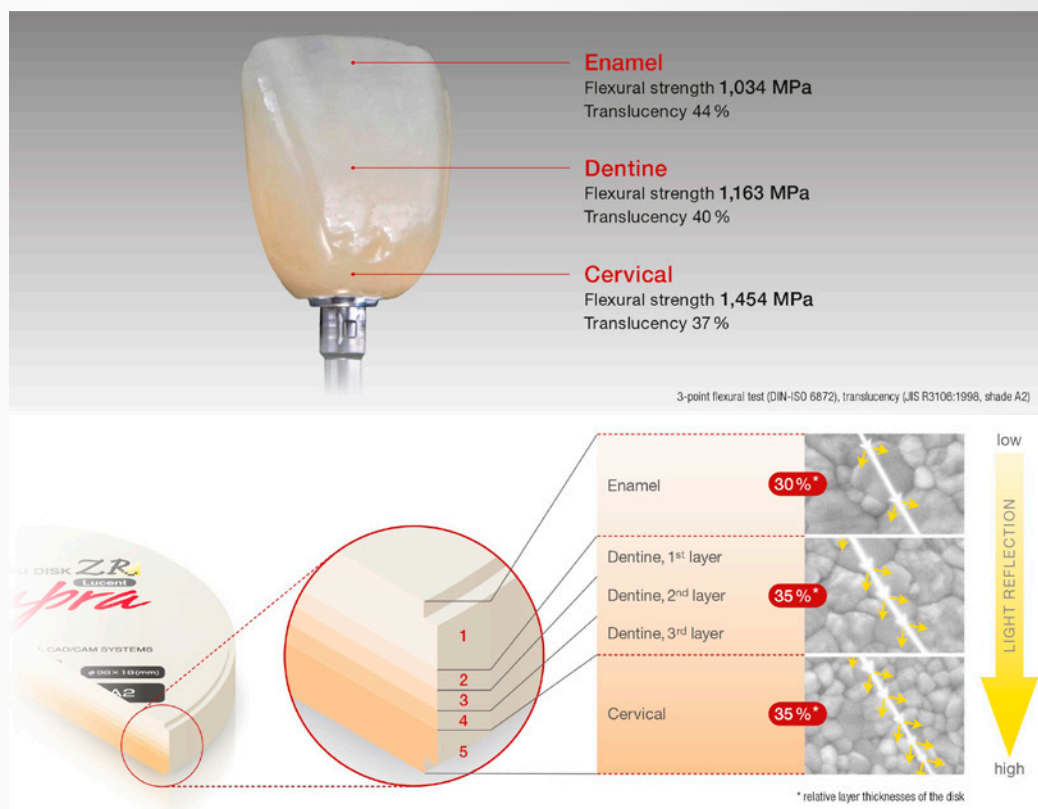

SUPRA DYSKI CYRKONOWE SHOFU JAPONIA

NOWA OFERTA CENOWA BRUTTO



10+1

12 mm - **724zł**

14 mm - **768zł**

16 mm - **832zł**

18 mm - **869zł**

22 mm - **933zł**

25 mm - **995zł**

30 mm - **1060zł**

12 mm - **658zł**

14 mm - **698zł**

16 mm - **756zł**

18 mm - **790zł**

22 mm - **848zł**

25 mm - **905zł**

30 mm - **964zł**

Dostępne kolory: Pure White, W0, W2, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

MATERIAŁY CAD/CAM YAMAHACHI



Dysk PMMA

Dyski PMMA Yamahachi są niezwykle cennym materiałem dla Twojego laboratorium do wykonywania uzupełnień tymczasowych najwyższej jakości. Idealnie dobrane odcienie w połączeniu z trwałością tego materiału pozwalają na tworzenie pięknych i funkcjonalnych uzupełnień tymczasowych od pojedynczego elementu aż po kompletne uzupełnienia uzębienia.

Na tymczasowe korony i mosty –
dostępne w 16 kolorach
wg VITA/W0.5/CLEAR.
Typ otwarty, średnica 98,5mm
Dostępne inne systemy AG i ZZ.

61 zł
grubość: 10, 12, 14mm

67 zł
grubość: 16, 18, 20mm



Dysk Woskowy

Dyski woskowe Yamahachi, przeznaczone są do projektowania CAD, frezowania CAM i tłoczenia lub odlewania w konwencjonalny sposób. Wosk doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej i jest całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Dzięki temu uzyskujemy gładkie odlewy.

Dysk woskowy (zielony)
do wzorników woskowych.
Typ otwarty, średnica 98,5mm
Dostępne inne systemy AG i ZZ.

VINTAGE ART UNIVERSAL

Farbki do porcelany VINTAGE Art Universal są przeznaczone do zewnętrznego i wewnętrznego barwienia różnych ceramicznych materiałów do zastosowań dentystycznych, takich jak systemy ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu, podbudowy z prasowanej ceramiki, korony porcelanowe na podbudowie z metalu (PFM) oraz sztuczne zęby z porcelany. Dostępne w zestawach lub pojedyncze kolory.



PŁYN YAMAMOTO VINTAGE ART UNIVERSAL

(płyn do mieszania w rzeczywistych kolorach)

Zawartość: 50 ml

Płyn do mieszania o podobnym współczynniku refrakcji jak w przypadku szkła. Mieszanka glazur i farbek do porcelany VINTAGE Art Universal uzyskuje ostateczny kolor i efekt przed wypaleniem.



VINTAGE PRO STARTER

Porcelana na podbudowy metalowe

Zestaw zawiera wszystkie komponenty do odbudowy w odcieniach A2 i A3. Praca przy użyciu porcelany Vintage Pro wykonana na metalu daje efekt pełnej ceramiki!

VINTAGE PRO jest systemem porcelany na podbudowy metalowe, wskazanym do licowania stopów szlachetnych, półszlachetnych i nieszlachetnych oraz stopów na bazie palladu o zakresie współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE od 13,5 do 14,8 x 10⁻⁶ K⁻¹.

VINTAGE PRO można stosować również na podbudowy metalowe wykonane za pomocą CAD / CAM i kształtowania galwanicznego/spiekania. System odcieni obejmuje klasyczne odcienie VITA* z różnorodnymi odcieniami umożliwiającymi odtworzenie szerokiego wachlarza odcieni.



CERAMAGE

strzykawka 4,6g

Światłoutwardzalny kompozyt z wypełniaczem ceramicznym. 73% wypełniacza, dostępna pełna gama kolorów.

**6+1 i 10+2
PROMOCJA**

CERAMAGE
meets digital

cena
180 zł



CERAMAGE UP

strzykawka 5g

Światłoutwardzalny, płynny, mikrohybrydowy materiał kompozycyjny. Do swobodnego aplikowania i modelowania. Nowy, doskonały materiał łączy zalety ceramiki oraz kompozytów w jednym punkcie.

CERAMAGE
meets digital

cena
214 zł

**6+1 i 10+2
PROMOCJA**



ZirGloss

Pasta polerska do tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i porcelany - 20g

WSKAZANIA
DO STOSOWANIA

Polerowanie
uzupełnień ceramicznych.

Gwiazda CEDE 2023



Nagroda Ekspertów
w kategorii Materiały
Stomatologiczne



cena
330 zł

Płyn modelujący do porcelany

iMix ! jest nowym płynem modelującym do porcelany firmy Smile Line.

Płyn iMix ! może być stosowany zarówno do ceramiki wysokotopliwej jak i niskotopliwej. Kolejną zaletą iMix ! jest wspaniały komfort pracy zapewniony podczas nakładania porcelany.

pojemność: 200ml, 1000ml

cena
160 zł
200 ml



cena
360 zł
1000 ml

VINTAGE ZR

Wysokotopliwa, mikro-ceramika na bazie skalenia na wszystkie podbudowy z ZrO.

Zalety:

- Bardzo dobra przyczepność przez wysokotopliwy liner opakerowy;
- Ciągły współczynnik rozszerzalności cieplnej, również po kilku napaleniach;
- Naturalna estetyka przy ekonomicznym nakładzie pracy dzięki technice 2 warstwowej;
- Doskonała współpraca zębów przeciwstawnych.



cena
129 zł
15 g dentyna

cena
146 zł
15 g pozostałe

cena
385 zł
50 g dentyna

cena
406 zł
50 g pozostałe

ZESTAW DO MIKROWARSTWOWANIA

2 płytki - do farbek i do ceramiki + 2 pędzelki

SlimPad Micro

Smile Line z dumą przedstawia SlimPad Micro, składa się on z 2 mini płytek do mieszania ceramiki, które mogą być używane zarówno z nowoczesnymi materiałami do techniki mikrowarstwowej, jak i do farbek, a nawet jako tradycyjna tacka do mieszania. Płytki są bardzo ergonomiczne.

Posiadają antypoślizgowe, gumowe nóżki oraz wyposażone są w magnesy pokrywki.

Mogą być używane z lub bez pasków PVA do utrzymywania wilgoci.

Pędzelki N.era INTENSO rozmiar #1 i #4

Mityczne pędzelki N.era opracowane na nowo i specjalnie przystosowane do mikrowarstwowego nakładania nowoczesnych materiałów na monolit - gorąca rekomendacja Enrico Ferrarelli z Rzymu (IT). Te niesamowite nowe pędzle są wyjątkowe i zapewniają jednocześnie wysoką sprężystość oraz hiper ostrą i stabilną końcówkę. Twoje najlepsze narzędzia dla ekstremalnej precyzji i komfortu pracy – ekstremalnie długa żywotność gwarantowana!



cena
1050 zł

PĘDZLE N.ERA

Pędzle N.era są produkowane z włókna kosmicznego, jakiego jeszcze nie widziano w branży dentystycznej. To włókno podobne do poliamidu, które przechodzi kilka specjalnych zabiegów chemicznych.

Właściwości (sprężystość, wchłanianie wody, stabilność na końcówce) dorównują lub przewyższają najwyższą jakość włosia Kolinsky.

Jeśli chodzi o żywotność - N.era są znacznie lepsze od Kolinsky'ego, ponieważ można nimi pracować znacznie dłużej.

Pod wpływem ciepła (strumień pary, wrząca woda destylowana) włókno N.era regeneruje się i przedłuża swoją żywotność!

Dostępne rozmiary:

#1, #4, #6R, #8R

Zapasy pędzla (2szt.):

#1 - **300 zł**, #4 - **360 zł**, #6 - **440 zł**, #8 - **520 zł**.



cena
230 zł
#1

cena
260 zł
#4

cena
300 zł
#6R

cena
350 zł
#8R

PŁYTKI DO FARBK TINTO MIESZANIE, PRZECHOWYWANIE, INDEKSOWANIE

- Zamykane płytki Tinto umożliwiają przechowywanie wstępnie zmieszanych produktów, takich jak farby lub pasty-opakery, chroniąc je przed kurzem. Tinto charakteryzują się unikalnym designem, ergonomią i kompaktowością (118x118x25mm). Pokrywa jest wyposażona w panoramiczne przezroczyste okienko wykonane z poliwęglanu i pozwala na pierwszy rzut oka rozpoznać zawartość płytki.

cena
950 zł
zestaw 2 szt.

- Tinto pomyślano, aby można je było układać jeden na drugim, oszczędzając w ten sposób dużo miejsca na stole. Można z boku oznaczyć markerem by rozpoznać.
- Dostępne są dwa modele. Pierwszy posiada 9 zagłębień o średnicy 18mm oraz mniejszy, głębszy otwór na płyn. Drugi model posiada 15 zagłębień o średnicy 14mm oraz dwa dołki małej głębokości na płyn.
- Płytki konfekcjonowane po 2 szt. w opcjach: 2x9 zagłębień, 2x15 zagłębień, mix.



ZESTAW 3 KOMPLETNYCH PĘDZLI RSPCT

#8R, #3, #1

Wybierz swój kolor uchwyty

TYLKO cena
850 zł



JAMES



NAZARÉ



CAFÉNOIR



BONBON ROSE



PUROSANGUE

PĘDZLE RSPCT SMILE LINE PRZEZNACZONE DO PORCELANY, GLAZURY I FARBK.

Syntetyczne jak naturalne!

Seria RSPCT Smile Line to nowa kolekcja pędzli wykonanych z rewolucyjnej mieszanki 100% włókien syntetycznych o właściwościach pędzelka naturalnego.

Główne zalety to:

- niesamowita stabilność
- niezwykle ostry czubek
- wspaniała odporność
- doskonała absorpcja wody
- bardzo długa żywotność
- alternatywa dla wykorzystywania zwierząt
- zapasy pędzla (2szt.): #1 - **290 zł**, #3 - **360 zł**, #6R/6LT - **430 zł**, #8R/8LT - **510 zł**.

cena
230 zł
kompletny pędzelek #1

cena
265 zł
kompletny pędzelek #3

cena
305 zł
kompletny pędzelek #6R/6LT

cena
350 zł
kompletny pędzelek #8R/8LT



NOWE UCHWYTY MARIANO MAURIZI

Dostępne pojedynczo oraz w zestawach z narzędziami!

cena
1750 zł
zestaw



cena
790 zł
zestaw



cena
110 zł
uchwyt



H₂O WATER STATION HIGIENA, LOGIKA, ERGONOMIA

- H₂O to niezbędne akcesorium, które uzupełnia stanowisko do pracy z porcelaną, po prawej lub po lewej stronie płytki do mieszania. Ta uniwersalna stacja pozwala wypłukać pędzel w wodzie, wygładzić go, aby nadać mu jak najostrejszą końcówkę na wiskozowej gąbce, a na koniec przechowywać go pionowo zanurzonego w wodzie w niezależnym pojemniku.
- Wszystkie komponenty H₂O są niezależne, co oznacza, że możesz wymieniać wodę w głównym pojemniku bez konieczności dotykania pojemnika do przechowywania... lub odwrotnie. Dzięki konstrukcji podstawy i zamocowaniu pojemnika do przechowywania możesz wybrać pozycję w zakresie 60°, w zależności od preferencji lub tego, czy jesteś leworęczny, czy praworęczny.
- Zestaw nie zawiera pędzli.



cena
395 zł

VENEER ME MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOICH LICÓWEK

- Dzięki VENEER ME będziesz mógł przewozić i wysyłać, a także manipulować swoimi hiperdelikatnymi licówkami w najwyższych warunkach bezpieczeństwa!
- Podstawa pojemników VENEER ME pokryta jest lepką podkładką z żelu poliuretanowego. Licówki są umieszczane na tej podkładce i przylegają naturalnie. Cały proces przygotowania wewnętrznej części licówki (wytrawianie kwasem, silanizacja) można przeprowadzić w tej pozycji bez obawy, że licówka wypadnie lub spadnie na podłogę. Materiał, z którego wykonana jest podkładka, jest bardzo odporny i może być wielokrotnie używany (w przypadku zużycia można go łatwo wymienić).
- Po zamocowaniu licówek na podkładce, ramkę membrany mocuje się do podstawy pojemnika w celu dodatkowego zamocowania. Wykonana z nylonu cienka membrana xx-thin delikatnie dopasowuje się do kształtu licówek. Teraz wystarczy zamknąć pokrywę, a twoja główna praca jest gotowa do dostarczenia.
- Ogromna zaleta: membrana jest przepuszczalna! Innymi słowy, lekarz może przystąpić do płukania i suszenia po założeniu ramy membrany na podstawę. W ten sposób lekarz może pracować w najlepszych warunkach i w całkowitym bezpieczeństwie.



cena
440 zł

1 szt.

cena
1100 zł

zestaw 3 szt.

PŁYTKI DO PRACY Z PORCELANĄ

Najnowsze płytki Smile Line do pracy z porcelaną zostały zaprojektowane po wnikliwej analizie wszystkich sugestii zgłaszanych przez techników dentystycznych.

Podstawowe zalety: bardzo płaska podstawa robocza, bardzo kompaktowy, minimalistyczny design, format ipada, łatwa i lekka do przenoszenia, możliwość układania w stosy, dostępne w czerni i bieli.

SlimPad jest dostarczany ze szklaną płytą ze szczelinami, które zostały precyzyjnie obrobione. Czarne paski filtracyjne PVA są wkładane pionowo w celu pochłaniania cieczy ze zbiornika i umieszczania jej na powierzchni w celu utrzymania porcelany o pożądanej konsystencji.



cena
1600 zł

Smile Line ☺
made in Switzerland

Slim Pad PRO - luksus w pracowni

UNITED COLORS OF D.VINCI

Zestaw intensywnych, fluorescencyjnych barwników do porcelany. Niewielka ilość barwnika United Colors dodana do rozmieszanej porcelany wybarwi ją na wybrany kolor. Różne kolory barwników dodane do poszczególnych proszków ceramicznych pozwalają na precyzyjne i szczegółowe ich nałożenie i identyfikację podczas modelowania uzupełnienia.

Dzięki właściwie dobranej gęstości płynnego barwnika zabarwione masy ceramiczne nie mieszają się ze sobą.

Barwniki United Colors wypalają się bez śladu. Należy nieco wydłużyć czas suszenia porcelany przed wypalaniem.

cena
490zł
 zestaw



HOLDING GEL ŻEL DO MOCOWANIA TYMCZASOWEGO

cena
230zł

Wystarczy niewielka kropla na kikut, aby bardzo dobrze i tymczasowo zamocować delikatne licówki porcelanowe oraz uzupełnienia pełnoceramiczne na modelu.

Żel podtrzymujący jest niezbędny do sprawdzania punktów kontaktowych, do łatwego nakładania pudrów korekcyjnych oraz do uzupełnień, które są sobie przeciwstawne.

Przezroczysty, dzięki czemu nie zmienia odcienia, całkowicie rozpuszcza się w wodzie i nie pozostawia śladów po wypaleniu.

Opakowanie: 5x3ml (strzykawki) lub 2x6ml (słoiczek)



Cyfrowe dopasowanie odcieni: sztuczna inteligencja w Twoich rękach!

NOWOŚĆ

OPTISHADE STYLEITALIANO TERAZ W WERSJI BLUETOOTH !!!

OPTISHADE STYLEITALIANO zapewnia nowe rozwiązanie do dopasowywania odcieni, które przewyższa wszystkie inne cyfrowe urządzenia do pomiaru koloru dostępne na rynku swoją dokładnością i powtarzalnością! Mierzony odcień komunikowany jest we współrzędnych L*a*b*, uniwersalnych wartościach w świecie kolorymetrii, bardzo intuicyjnych i łatwych do interpretacji przez użytkownika. Współrzędne L*a*b* mogą zostać wyeksportowane do programu Matisse, który obliczy dla Ciebie wszystkie receptury i mieszanki proszków ceramicznych niezbędnych w danym przypadku.

8800 zł


Pełny zestaw zawiera:

- 1 jednostka OPTISHADE STYLEITALIANO w komplecie ze stożkiem prowadzącym przechwytywanie i nasadką kalibracyjną
- 1 kabel USB do ładowania
- 4 stożki prowadzące do przechwytywania
- 4 nasadki kalibracyjne
- 1 instrukcja obsługi i 1 skrócona instrukcja obsługi
- Aplikacja OPTISHADE STYLEITALIANO (bezpłatna) do pobrania z Appstore
- 30-dniowa bezpłatna licencja oprogramowania Matisse

Dane techniczne:

- wymiary jednostki: długość 51 mm, średnica 81,5 mm
- waga 60g
- działa z iOS iPhone, iPad i iPod Touch (brak w zestawie)

MDP2

Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości między 55 a 85mm.


2790 zł

NOWY MODEL


VERTEX ThermoSens - Granulat

Nie zawiera monomeru i kadmu.

Przeznaczony dla pacjentów z alergiami.

Nielamliwy, o swoistej elastyczności i znikomym skurczu (poniżej 1%).

Do wykonywania protez całkowitych i częściowych.

Dostępny również w kartridżach.



BEZ MONOMERU

cena
700 zł
1000g granulat

cena
300 zł
400g granulat

VERTEX RS

Polimeryzujący na gorąco akryl – polimer na płyty protez. Materiał stanowi podstawę dla protez częściowych i całkowitych. Akryl bez kadmu o szybkim, 20-minutowym cyklu polimeryzacji dla standardowej grubości płyty protezy.



cena
950 zł

cena
360 zł

zestaw
proszek 1000g
+ płyn 1000 ml

zestaw
proszek 4000g
+ 2 x płyn 1000ml

VERTEX Self Curing

Akryl samopolimeryzujący do napraw, podścielen protez, jak i do stawiania zębów.



cena
460 zł

zestaw
proszek 1000g
+ płyn 1000ml

ZĘBY AKRYLOWE I KOMPOZYTOWE YAMAHACHI

NEW ACE / NAPERCE zęby akrylowe dwuwarstwowe



przody (6szt.)



boki (8szt.)



gebiss (28szt.)

**ZAMÓW BEZPŁATNIE
PRÓBKĘ ZĘBÓW
Z KATALOGAMI
KSZTAŁTÓW**



CROWN PX / EFUCERA PX zęby kompozytowe

(dostępne kolory A1, A2, A3, A3,5)



przody (6szt.)



boki (8szt.)

**20+4
PROMOCJA**

kupując 20 płytek
4 dodatkowe
otrzymujesz za

1 zł każda

WOSK MODELOWY



WOSK MODELOWY

210 zł



Charakteryzuje się trwałością w połączeniu z doskonałą plastycznością. Występuje w twardościach soft i medium. Opakowanie: 2,25kg.

ŻYWICE DO DRUKU 3D

NEXT DENT BASE


- do drukowania płyt protez ruchomych

NextDent Base to żywica do druku 3D przeznaczona do produkcji podbudów protez ruchomych. Wysoka odporność na pękanie

- Elastyczność w przypadku protez częściowych
- 4 kolory pasujące do najpopularniejszych odcieni dziąseł dla poprawy estetyki
- Materiały te zapewniają dokładne i powtarzalne rezultaty drukowania.



cena promocyjna
1360 zł

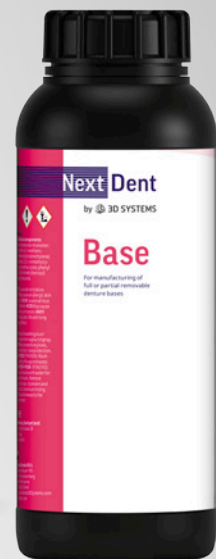

ŻYWICE DO DRUKU 3D


NEXTDENT MODEL 2.0 - do drukowania modeli dentystycznych

NextDent Model 2.0 charakteryzuje się wysokim stopniem dokładności, dzięki czemu materiał ten nadaje się do szczegółowych modeli głównych - protetycznych i ortodontycznych, gdzie wymagana jest wysoka precyzja.

Modele posiadają bardzo widoczne szczegóły dzięki kolorowi i nieprzezroczystości. Modele wykonane z tej żywicy posiadają idealną powierzchnię do skanowania odcisków. Precyzyjnie wydrukowane modele są idealną bazą do tworzenia dentystycznych elementów roboczych. Dostępny w kolorze brzoskwiniowym, białym i szarym.



cena promocyjna
599 zł

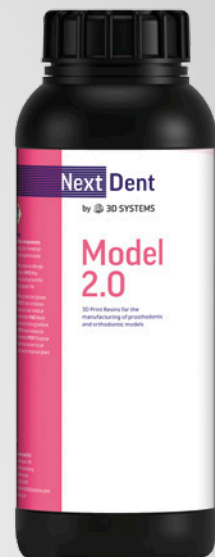

ŻYWICE DO DRUKU 3D

NEXTDENT CAST - do drukowania obiektów do odlewu


To żywica światłoutwardzalna stworzona do drukowania obiektów do dalszego odlewu.

Żywica spala się bezresztkowo i jest odpowiednia do wszelkiego rodzaju zastosowań np. do wykonywania płyt protez szkieletowych czy odlewanych aparatów ortodontycznych.

Dostępna w kolorze purpurowym.



cena promocyjna
890 zł

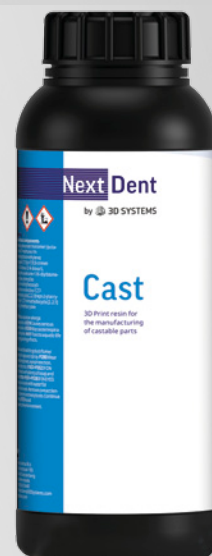

DEKEMA AUSTROMAT[®] 674i G2[®]

NOWOŚĆ



Piec do synteryzacji

Wydajny, przestronny, inteligentny.

- AUSTROMAT 674i G2 zachwyca opatentowaną, wysokotemperaturową termoparą oraz dwupoziomowym systemem stołu mieszczącym aż do 80 elementów.
- Absolutna czystość: żadnych przebarwień, żadnych cykli czyszczenia. Dzięki DEKEMA AutoDry & AUTORITE możesz rozpocząć pracę w trybie ciągłym i natychmiast uruchomić kolejne cykle.
- Dodatkowo: nieograniczony dostęp do programów synteryzacji z bazy DEKEMA.

System Grzewczy DEKEMA

- Wysokiej jakości technologia grzewcza SiC - jednolity rozkład temperatury
- Niezrównana trwałość i długowieczność dzięki materiałom o wysokiej czystości.
- Maksymalna temperatura synteryzacji 1600 °C

System stołów DEKEMA

Opatentowany system stolików z możliwością zastosowania do 2 poziomów (ø 100 mm na poziom)

**Dostępne również piece do wypalania
porcelany i synteryzacji cyrkonu.**

ZAPYTAJ O CENĘ

DEKEMA AUSTROMAT[®] 654i G2[®]



Piec do tłoczenia i wypalania porcelany w próżni

Perfekcja w każdym detalu: AUSTROMAT 654i G2 to połączenie najnowocześniejszej technologii i wyjątkowej wszechstronności. Odkryj płynne działanie programów i możliwość jednoczesnego, precyzyjnego tłoczenia aż trzech kolorów – szybciej, łatwiej i bez kompromisów.

Dzięki innowacyjnym funkcjom serii „G2i” zyskujesz nieograniczony dostęp do programów wypalania i tłoczenia, pełną kontrolę nad danymi w DEKEMA Circle oraz wiele innych korzyści, które wyniosą Twoją pracę na zupełnie nowy poziom.

Termopara DEKEMA

- Najwyższa precyzja dzięki zastosowaniu platyny i platyny-rodu o wyjątkowej czystości.
- Unikalna technologia DEKEMA gwarantuje kontrolę temperatury z dokładnością poniżej 0,5°C – poziom nieosiągalny dla innych rozwiązań.
- Perfekcyjna stabilność na której możesz polegać w każdej sytuacji.

System podnoszenia DEKEMA

- Płynny i cichy ruch podnoszenia minimalizujący wibracje.
- Wyjątkowo trwały mechanizm ze stali nierdzewnej – całkowicie bezobsługowy.
- Możliwość indywidualnego ustawienia pozycji suszenia dla maksymalnej wygody i precyzji.

DEKEMA AutoDry & AUTORITE

Innowacyjna funkcja DEKEMA AutoDry inteligentnie symuluje pomiar temperatury bezpośrednio na obiekcie i automatycznie dostosowuje odległość pomiędzy wypalaniem elementem a komorą pieca dzięki bezwibacyjnemu podnośnikowi. Efekt? Perfekcyjnie kontrolowane, szybkie i oszczędzające czas etapy suszenia, nagrzewania i chłodzenia.

DEKEMA AUTORITE gwarantuje pełną kontrolę nad procesem – od precyzyjnego suszenia, przez nagrzewanie, aż po błyskawiczne chłodzenie – wszystko dzięki inteligentnemu sterowaniu położeniem podnośnika. Umożliwia to pracę w trybie ciągłym, bez potrzeby wychładzania komory, a także osiąganie zawrotnych zmian temperatury przekraczających 1 000°C/min. Przykład? Od temperatury pokojowej do 900°C w zaledwie 30 sekund! Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najwyższej wydajności, szybkości i precyzji – dokładnie wtedy, kiedy tego potrzeb.

**Dostępne również piece do wypalania
porcelany i synteryzacji cyrkonu.
ZAPYTAJ O CENĘ**

**Do wszystkich materiałów przedstawionych w gazecie
oferujemy szeroką gamę narzędzi do obróbki.**

ZAPYTAJ HANDLOWCĘ

tel. (42) 633 87 55, e-mail: holdental@holdental.pl